


Fraises en céramique

Nouvelles fraises en céramique de haute performance développées pour une utilisation en pédicurie, en podologie et pour le design des ongles, en tant qu'alternative aux fraises en carbure de tungstène actuelles. La céramique spéciale, de haute performance, avec un poids inférieur jusqu'à 25 % par rapport aux fraises en carbure de tungstène, est ressentie comme agréable et douce par l'utilisateur et par les patients. Grâce à la biocompatibilité de la céramique, les fraises en céramique sont particulièrement indiquées pour les patients qui ont de fortes allergies au métal.

Pour tous les traitements des ongles naturels ou des ongles artificiels, trois dentures sont disponibles.

les fraises en céramique sont appropriées pour tous les traitements de désinfection et de stérilisation autorisés.

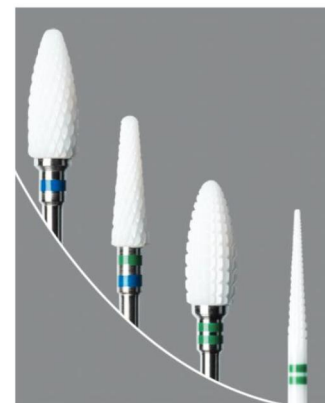

Denture croisée grain moyen

Podologie / Pédicurie: utilisation universelle, traitement des ongles et mise en forme, ainsi que suivi des ongles atteints de mycoses et des ongles épais.

Design des ongles : utilisation universelle, indiquée pour le traitement des ongles en gel et en acrylique.

K10 Kreuzverzahnung mittel Cross-cut medium Denture croisée grain moyen			
L mm Size $\varnothing 1/10$ mm Order No. Speed max. Speed opt.		14,0 060 K7210.060HP 20.000 12.000	13,0 045 K5610.045HP 30.000 15.000



Denture croisée gros grain pour une élimination plus importante

Podologie / Pédicurie: pour une mise en forme ciblée des ongles déformés ou des ongles épais atteints de mycoses.

Design des ongles : traitement des ongles en gel.

K51 Kreuzverzahnung grob Cross-cut coarse Denture croisée grosse			
L mm Size $\varnothing 1/10$ mm Order No. Speed max. Speed opt.		12,0 060 K5251.060HP 20.000 12.000	13,0 045 K5651.045HP 30.000 15.000



Denture simple avec section transversale pour une élimination très importante

Podologie / Pédicurie : pour le traitement des ongles très épais, déformés et des callosités, ainsi que des résines des orthèses.

Design des ongles : traitement des ongles en acrylique.

K75 Einfachverzahnung mit Querhieb Single-blade with cross-cut Denture simple avec section transversale				
L mm Size $\varnothing 1/10$ mm Order No. Speed max. Speed opt.		14,0 060 K7275.060HP 20.000 12.000	14,0 045 K5775.045HP 30.000 15.000	14,0 023 K0175.023HP 40.000 15.000



EDENTA AG

Hauptstrasse 7 / CH - 9434 Au / SG / Suisse / Tel.: +41 (0)71 747 25 25 / Fax +41 (0)71 747 25 50 / Email: info@edenta.ch / Site web: www.edenta.com

EDENTA Etablissement

Industriestrasse 13 / FL - 9486 Schaanwald / Liechtenstein / Tel.: +423 375 20 50 / Fax +423 375 20 55 / E - Mail: info@edenta.com / Internet: www.edenta.com